

Estetik i sin rätta essens



Essentia™
från GC

Öppna dörren
till det enkla

Följ din intuition

GC

Kan det bli enklare än så här?

Höga estetiska krav associeras ofta med komplex skiktningsteknik. Efter flera års utvecklingsarbete, **baserat på framstående tandläkares erfarenheter inom estetik**, kan GC nu presentera ett paradigmskifte inom fyllningsterapin med ett **innovativt och djärvt färgkoncept**. Essentia utgör **själva essensen i kompositapplicering** med skiktteknik. Sju sprutor är det enda som behövs för att du alltid ska uppnå perfekt estetik.

Våga bryta mot konventionerna och välj Essentia från GC



Prof. Marleen Peumans
Belgien

Traditionella färgsystem består av olika nyanser (färger) som kallas för A, B, C och D. Likväl är det ett välkänt faktum att **emalj och dentin har olika särdrag som båda bidrar till hur tandens slutgiltiga färg uppfattas**. Om du bryter dig loss från traditionella monokromatiska färger och **fokuserar på att återskapa emaljens och dentinets särdrag** kan du få betydligt naturligare resultat med endast två skikt.

Det här får du med Essentia.

De **tre dentinfärgerna** varierar i kroma och opacitet på samma sätt som naturligt dentin ändras under patientens livstid. De reglerar färgens **"intensitet"** i den **färdiga fyllningen**.

Tillsammans med dentinfärgerna ger de **två emaljfärgerna translucens** och liv åt restaurationen.

Light
Dentin



Medium
Dentin



Dark
Dentin



Light
Enamel



Dark
Enamel



Universal



Masking
Liner



Varje färg som ingår i **Essentia** är en unik förening av användarvänliga och optiska egenskaper.

Dentinfärgerna: Garanterar färgadaptation i varje patientfall.

Dentinfärgerna har en mikrohybridbaserad sammansättning som tillför **rätt reflexion och ljusspridning** för ett perfekt resultat.

Materialets mjuka viskositet gör det lätt att hantera med både pensel och spatel. Välj själv!



LD

MD

DD

Emaljfärgerna: Tillför ljus till restorationen.

Eftersom emaljfärgerna har mer translucens får restorationen mer liv. Du kommer att bli förvånad över att endast behöva polera i några få **steg och över den hållbara glansen**.

Emaljmassorna är något mer högviskösa för att slutgiltig extern hårdhet, precis som hos emaljen, ska kunna uppnås.



LE

DE

Universal: En enda färg för alla mindre eller posteriora restorationer.

Den här färgen är framtagen för att en **perfekt matchning** ska kunna uppnås i alla situationer där skiktning inte behövs som till exempel i mindre eller posteriora kaviteter.

Materialet är **något lättare att packa** för att underlätta applicering i det posteriora området.

U

Masking Liner: Döljer missfärgningar.

Eftersom djupa kaviteter ofta är svårt missfärgade eller fläckade har Masking Liner utvecklats i syfte att maskera sådana defekter med **ett tunt opakt skikt**.

Materialet är **flytande** för att även de djupaste delarna av kaviteten ska kunna nås.



ML



Med Essentia skapar du anteriora fyllningar som
upplevs som äkta med endast två färger!



Kliniskt fall dokumenterat av Dr Javier Tapia Guadix, Spanien och Prof. Marleen Peumans, Belgien.

I det här besvärliga fallet i anteriora tänder behövdes **endast två färger** (Medium Dentin och Light Enamel) för att det **naturliga utseendet** hos angränsande tänder skulle kunna efterliknas helt och få den unga vuxna patienten att vilja le igen.



Med Essentia skapar du **naturligare** posteriora restaurationer
utan extra arbetsinsatser.



Kliniskt fall dokumenterat av Dr Javier Tapia Guadix, Spanien.

För de flesta fyllningarna i posteriora områden blir resultatet perfekt med enbart den **högkromatiska färgen Dark Dentin** i kombination med **Light Enamel** som ger en väldigt **naturlig** uppbyggnad i posteriora tänder.



Essentia gör det komplicerade enkelt.

Möjligheterna blir ännu fler med de fyra modifierfärgerna. Färgerna är framtagna för att du snabbt ska **kunna karakterisera fyllningen** och skapa opalescens i incisalområdet med Opalescent Modifier (vänster) eller karakterisera fissurer i det posteriora området med Red Brown Modifier (höger).



Kliniskt fall dokumenterat av Dr Javier Tapia Guadix, Spanien.

Upptäck 6 alternativ som passar för alla kliniska fall.

Anteriora regionen: Anpassa skiktningproceduren efter patientens ålder.

För fyllningar med **Bleach** eller **Junior** ska emaljen vara vit och opak medan dentinet också går mot vitt. I det här fallet används Light Dentin och Light Enamel i kombination.

LD LE



Hos yngre patienter är en kombination av opak vit emalj med mer kroma i dentinet önskvärd. Här har kombinationen **Young** med färgerna Medium Dentin och Light Enamel använts.

MD LE



Tänderna hos vuxna individer är mer translucenta och lätt färgade medan dentinet bibehåller en medelstark kroma. Kombinationen **Adult** rekommenderas. Hos äldre finns ett behov av mer translucens och kroma i emaljområdet eftersom dentinet blir mycket mörkare och mindre translucent.

MD DE



Den perfekta kombinationen i sådana fall är **Senior** med färgerna Dark Dentin och Dark Enamel.

DD DE



Posteriora regionen: Naturlig applicering i två skikt eller restauration med en enda färg.

Posterior / Mono

Många gånger räcker det att använda en färg i posteriora områden, nämligen färgen Universal, för att resultatet ska bli estetiskt tilltalande.

U



Posterior / Duo

Dentinet i posteriora områden uppfattas oftast som mörkare samtidigt som emaljen har kvar en vitare färgton. Här har Dark Dentin och Light Enamel använts.

DD LE



Essentia: Fyllningsterapi med tvåskiktsapplicering och färre färger.



Refillförpackning, spruta

- 2 ml spruta, refill: LD, MD, DD, LE, DE, U, OM
- 2 ml spruta med 20 appliceringsspetsar: ML
- 2,4 ml spruta: BM, RBM, WM

Refillförpackning, Unitip

- Refiller med 15 Unitip: LD, MD, DD, LE, DE, U

Starter Kit, spruta

- 7 sprutor, 1 av varje färg: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML
- 20 appliceringsspetsar
- Tillbehör

Starter Kit, Unitip

- 30 Unitip (5 Unitip av varje färg: LD, MD, DD, LE, DE, U)
- 1 spruta ML, 20 appliceringsspetsar
- Tillbehör

Modifier Kit


- 4 sprutor: OM, BM, WM, RBM



Essentia färger:



Essentia Modifiers:

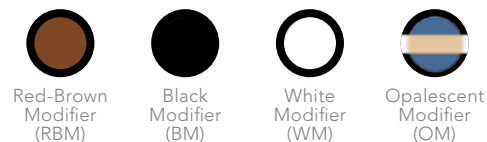

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 http://www.gceurope.com

GC Nordic AB
 Box 70396
 107 24 Stockholm
 Tel. 08-506 361 85
 info@nordic.gceurope.com
 http://www.gceurope.com/local/nordic

